



CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CERTIFICADA NSF




Pantalla LCD

Con la pantalla LCD grande es fácil de monitorear todos los parámetros de seguridad de un vistazo; y su panel de control de tamaño ergonómico mejora la interface de los usuarios.

Ventana Frontal

Dos capas laminadas de vidrio endurecido mayor a 5mm, anti UV

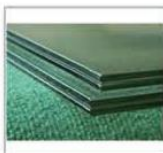

Ruedas

Ruedas universales con freno y patas niveladoras.



Llave de Gas & Llave de Agua SS



Conector a Prueba de Agua



Zona de Trabajo

Diseño del chasis



Lámpara UV

Emisión de 253.7 nanómetros para una descontaminación más eficiente.



VENTAJA

1. Ventana frontal motorizada.
2. Pantalla LCD Grande , toda la información visualizada
3. Velocidad de aire automática ajustable con el bloque de filtro.
4. La pared trasera y lateral está fabricada de acero inoxidable de una sola pieza.
5. Función de bloqueo interno: lámpara UV y ventana frontal; lámpara UV y ventilador, lámpara fluorescente; ventilador y ventana frontal.
6. Parte frontal inclinada a 10° para ofrecer comodidad al operador mientras trabaja por un periodo prolongado, reduciendo el brillo y maximizando el alcance en el área de trabajo.

PARÁMETROS TECNICOS

Modelo	11235BBC86(3')	BSC-4FA2(4')	11236BBC86(6')
Tamaño Externo (W*D*H)	1087*775*2265mm	1383*775*2295mm	1873*775*2295mm
Tamaño Interno (W*D*H)	910*600*660mm	1210*660*660mm	1700*600*660mm
Altura de Superficie de Trabajo	750 mm		
Apertura Máxima	550mm (22*)		
Apertura Testeada	Altura de seguridad 200mm (8*)		
Volumen de Flujo de Aire	349m³/h (205cfm)	465m³/h (275 cfm)	649m³/h (382cfm)
Flujo Bajo Desfogue	64%: 638m³/h (375cfm) 38%: 359m³/h (211cfm)	64%:868m³/h(498 cfm) 36%: 488m³/h (287 cfm)	64%:1190 m³/h (700cfm) 36%: 669m³/h (394cfm)
Ventana Frontal Filtro EPA Tipo de Protección de Filtro	Motorizado. Dos capas laminadas de vidrio endurecido ≥5mm. Anti UV. Dos indicadores de vida del filtro, 99.999% de eficiencia en un filtro de 0.3µm. Estructura de aleación de aluminio		
Ruido Iluminación Pantalla	NSF 49≤61 dB / EN 12469≤58Db ≥ 1000 Lux Pantalla LCD		
Toma a Prueba de Agua Grifo Resistencia a Tierra	Consumo de Agua Total : ≤500W Agua de Grifo *1 , Grifo de gas *1 ≤ 0.10Ω		
Fuente de Alimentación	AC220V± 10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz, Amperios de Carga Total: 9A, BTU/Hr: 1689		
Consumo	300W	400W	500W
Alarma Motor	Velocidad de Flujo de aire anormal, cambio de filtro; ventana frontal sobre elevada Un motor EMC, 110V & 220V aceptable, velocidad de ajuste, alta eficiencia y bajo consumo de energía.		
Material	Área de Trabajo: Acero inoxidable de 304 Placa Decorativa y estructura: acero laminado en frío con recubrimiento electrostático anti-bacterial.		
Lámpara UV	18W	30W	40W
	Lámpara UV germicida, Emisión de 253.7 nanómetros para una descontaminación más eficiente.		
Accesorios Estándar	Lámpara fluorescente, lámpara UV *2, Soporte de mesa, agua SS & llave de gas, válvula de drenaje, tomas a prueba de agua, Acero inoxidable Bares I.V con 10 ganchos.		
Accesorios Opcionales	Reposabrazos, Analizador de flujo de aire, esterilizadora de fumigación Formalin, esterilizadora de infrarrojo, soporte de base ajustable, control remoto.		
Tamaño del Paquete (W* D *H)	1250*1080*1840mm	1540*1080*1900mm	2020*1080*1900mm
Peso Bruto	270kg	334kg	363kg